



**BARIATRIE
XXL
PRODUKTE**

Ausg. 2022/01



INHALT

XXL



Netti 4U CED XL
1.236
SEITE 7



Netti III HD
1.290
SEITE 8



Netti III XHD
1.295 / 1.296
SEITE 9



Netti 450 T
1.293
SEITE 10



Netti 450 F
1.294
SEITE 11



EUROCHAIR² XXL
2.850
SEITE 12



EUROCHAIR² HD
2.850
SEITE 13



AVANTI
1.736
SEITE 14



CL 510
1.264
SEITE 16



CL 515
1.274
SEITE 17



iCHAIR XXL
1.614
SEITE 18



**KATAPULTSITZ
UPLIFT XXL**
SEITE 19



**TOILETTENSTÜTZ-
GESTELL XXL**
SEITE 20




**XXL DUSCHHOCKER
MIT ARMLEHNEN**
SEITE 21



**ALPHA
RUTSCHBRETT**
SEITE 22



**ALPHA
DREHSCHLEIBE**
SEITE 23

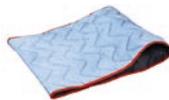

**ALPHA
GLEITMATTEN**
SEITE 24



**ALPHA OFFENE
GLEITMATTE
CAREMASTER**
SEITE 25

*inspire
joy of life*



TECHNISCHE DATEN

ALLE TECHNISCHE DETAILS AUF EINEN BLICK
AB SEITE 26 ODER AUF DER PRODUKTSEITE




BARIATRIE

Das medizinische Spezialgebiet der Bariatrie beschäftigt sich mit der Behandlung, Vorbeugung, Epidemiologie und Ursachen von Übergewicht und Adipositas. Die durch Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit ausgelöste Fettleibigkeit verläuft häufig mit weiteren krankhaften Auswirkungen.

DIE PASSENDE VERSORGUNG

Um die richtige Hilfsmittel-Versorgung zu ermöglichen, benötigt man fundiertes Grundwissen z. B. wo haben Hilfsmittel einen positiven Einfluss auf die Versorgung? Das Ziel muss immer die Gesundheit, die Bewegung und die Unabhängigkeit von jeglichen Hilfsmitteln sein. MEYRA sieht sich mit seinen Produkten als wichtige Schnittstelle in der Versorgungskette:

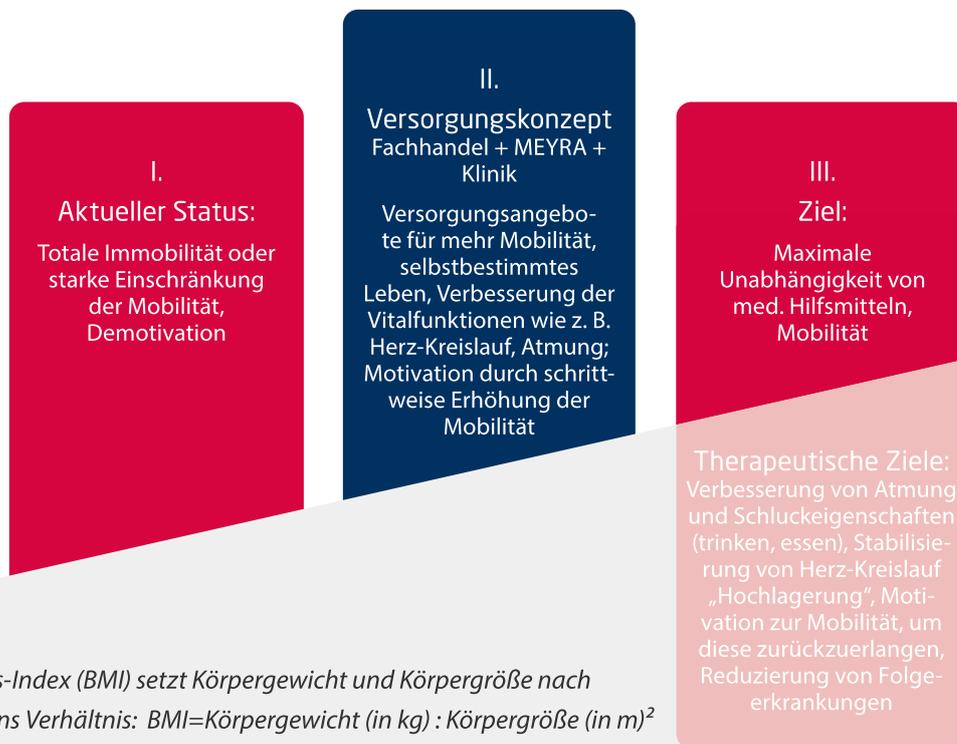

Der Body-Mass-Index (BMI) setzt Körpergewicht und Körpergröße nach dieser Formel ins Verhältnis: $BMI = \text{Körpergewicht (in kg)} : \text{Körpergröße (in m)}^2$
Mit einem BMI von 30 kg/m^2 zählt eine Person bereits als adipös. Spezielle und oft individuelle Hilfsmittel werden nötig, die einer hohen Beanspruchung standhalten und eine Therapie bestmöglich unterstützen.

Optimale BMI-Werte bei Frauen und Männern


Alter	BMI Mann	BMI Frau
19 – 24	19 – 24	18 – 23
25 – 34	20 – 25	19 – 24
35 – 44	21 – 26	20 – 25
45 – 54	22 – 27	21 – 26
55 – 64	23 – 28	22 – 27
> 64	24 – 29	23 – 28

BMI (kg/m ²)	Erläuterung
< 16,00	starkes Untergewicht
16,00 – 16,99	mäßiges Untergewicht
17,00 – 18,49	leichtes Untergewicht
18,50 – 24,99	Normalgewicht
25,00 – 29,99	Übergewicht
30,00 – 34,99	Adipositas Grad I
35,00 – 39,99	Adipositas Grad II
≥ 40,00	Adipositas Grad III

Quelle: <https://www.bmi-tabellen.de/>

Immer mehr stark Übergewichtige

Anteil der Männer und Frauen ab 18 Jahren mit Übergewicht/Adipositas in Deutschland (in %)

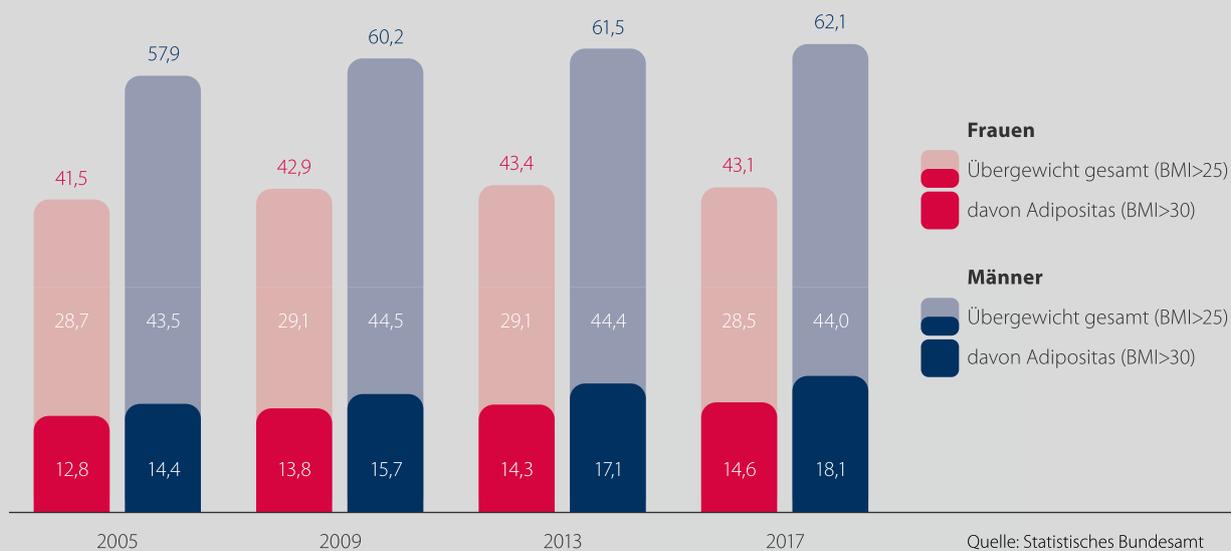

Die diagnostizierten Fälle von Adipositas nehmen stetig zu. Ein individuelles Versorgungskonzept ist für den betroffenen Patienten besonders wichtig, um einen positiven Behandlungsverlauf zu erzielen.

VERSORGUNGS- KONZEPT BARIATRIE/ XXL

Unser Versorgungskonzept Bariatrie/XXL sieht eine persönliche Anpassung vor Ort vor. Durch Demo-/Vorführware wird die Produktvorstellung besonders einfach: Erprobungsberichte werden digital erstellt. Eine strukturierte Anpassung mit 5 Seating Steps sichert die Qualität bei jeder Beratung. Für die richtige Argumentation von Vorteilen und bei Widersprüchen ist ein qualifizierter Support besonders wichtig.

FORTBILDUNG ZUM FACHBERATER BARIATRIE

Um die nötige Kompetenz zu erhalten, bietet unser Konzept NewCampus Schulungen an. Auch die 360°-Kompetenzentwicklung XXL wird berücksichtigt, um den Anforderungen in Krankenkassen-Verträgen gerecht zu werden. Die Module werden im Mix aus Präsenzunterricht, Webinar oder Tutorial verständlich vermittelt. Nach jedem Modul wird eine Erfolgskontrolle durchgeführt.

MODUL I
Produktkompetenz
(Produktübersicht
und technischer
Aufbau)

MODUL III
Med.-therap.
Kompetenz

MODUL II
Anwendungs-
kompetenz
(Wie wende ich
die Produkte
richtig an?)

MODUL IV
Wirtschaftliche
Kompetenz - Ver-
tragliche Situation
und Versorgungs-
ziele

MODUL VI
Soziale Kompetenz
(Zielgruppe verstehen
und motivieren)

MODUL V
Rechtskompetenz
(Patientenrechte –
Übersicht)

NEWCAMPUS
MEYRA Netti TZA

**WERDEN SIE
ZUM VERSORGUNGS-
SPEZIALISTEN**

www.meyra.de/newcampus

ERFOLGS- GESCHICHTE

Geschichten wie diese zeigen uns ganz klar, wie wichtig eine konstruktive Zusammenarbeit ist. Gemeinsam mit dem Sanitätsfachhandel und Therapeuten haben MEYRA-XXL-Versorgungsspezialisten ein Mobilitätskonzept für Hans M. entwickelt:

Schritt 1 – Aktueller Status und Erwartungen definiert

Schritt 2 – Beobachten

Schritt 3 – Ziele und Zwischenziele definieren
(Strategie zur Zielrealisierung)

Schritt 4 – Konfiguration der einzelnen Versorgungslösungen

Schritt 5 – Stetige Evaluation

Nachdem wir alle wichtigen Daten erfasst hatten und ein Mobilisierungskonzept stand, merkte man Hans M. bereits die wachsende Motivation an. Nach monatelanger Zeit im häuslichen Bereich, wieder raus in die Natur – für Hans M. rückte das Ziel nun endlich näher. Nur 500 Meter entfernt war ein Wald gelegen, doch dieser war für ihn bislang unerreichbar. Der Sanitätsfachhandel und der MEYRA-Versorgungsspezialist überlegten sich in Absprache mit dem Arzt und Therapeuten bis zur Fertigstellung des Elektro-Rollstuhls eine Übergangslösung. Wir wollten Hans M. frühestmöglich eine Vision von mehr Leichtigkeit vermitteln. Das Hilfsmittel musste stabil genug sein, um die über 280 kg von Hans M. zu mobilisieren und sicher genug, um den unebenen Waldboden standzuhalten. Die Wahl fiel auf den Multifunktionsrollstuhl Netti 450 T, welcher für bis 450 kg Gesamtbelastung ausgelegt ist. Gemeinsam wurde der Rollstuhl konfiguriert und auch gegenüber der Krankenkasse argumentiert.

Und tatsächlich mit dem Netti Rollstuhl konnten wir Hans M. den langersehnten Waldbesuch ermöglichen. Er fing an zu weinen und spürte deutlich, wie ein Stück Lebensqualität zurückkehrte. Durch die Verstellung der Sitzkantelung und Rückenkantelung wurde Fundamentales geändert: Hans M. konnte auf einmal besser atmen und seine Vitalfunktionen waren deutlich verbessert. Die Beine hochzulegen war ein Segen für ihn – sein Allgemeinbefinden wurde positiv beeinflusst. Genau das wollten wir erreichen. Hans M. fühlte sich einfach gut und war mit ausreichend Motivation und der richtigen Einstellung bereit für den noch langen Weg. Sein Ziel: Alleine in den Wald – ohne Hilfe, selbstbestimmt, wann und wohin er will.

Hans M.,
287 kg

Situation:
Motivationslos, keine selbstständige Fortbewegung

Ziel:
Mobilisation und Verbesserung des Allgemeinzustands

Hilfsmittel: Netti 450 T

5 Seating
STEPS
Netti

Hans M. hat einige Monate später schon über 80 kg abgenommen. Er fährt nun selbstständig einen Elektro-Rollstuhl. Natürlich ist sein Genesungsweg noch lang. Wir freuen uns über seinen Fortschritt und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg.

LEICHT UND KOMPAKT



Netti 4U CED XL
1.236



NETTI 4U CED XL – GROSSER KOMFORT FÜR GROSSE MENSCHEN

- multifunktional mit Sitz- und Rückenkantelung
- teildynamisch für Nutzer mit Bewegungsstörungen
- Benutzergewicht bis 160 kg
- Sitzbreiten 550 und 600 mm verfügbar
- geringes Gewicht
- kompaktes Maß
- leichter Antrieb

BESOND

ANF

NETTI III HD – HOHER KOMFORT UND GUTE ENTLASTUNG


- Benutzergewicht bis 160 kg
- doppelte Gasdruckfeder für Sitzkantelung
- hochwertiges, ergonomisch geformtes Netti Smart Rückenkissen
- Sitzbreiten 350 – 600 mm verfügbar
- Dynamische Komponenten als Option
- Volldynamischer Netti Dynamic III HD mit dynamischer Kopfstütze, Beinstütze, Sitz- und Rückeneinheit
- winkelverstellbare Netti Grandis Positionierungsbeinstützen
- 45° Sitzkantelung und extralange Sitztiefe als Option
- zahlreiche Zubehör-Optionen
- ideal für Nutzer mit hohen Anforderungen



Netti III HD
1.290



ERE ORDERUNGEN

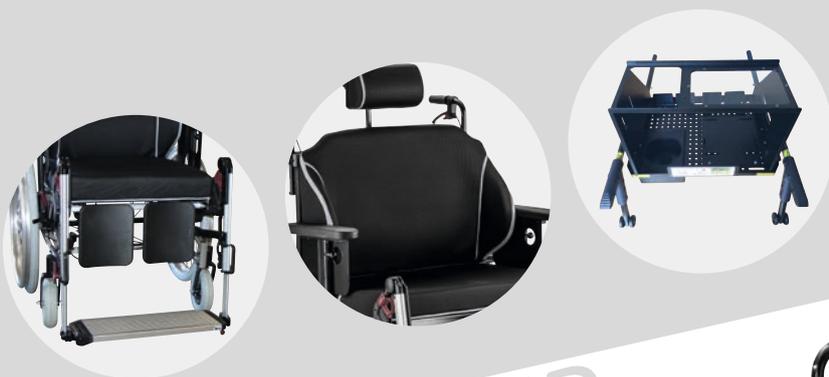

Netti III XHD
1.295 / 1.296



NETTI III XHD – MAXIMALE DRUCKENTLASTUNG

- verstärkte Ausführung
- bis 200 kg Nutzergewicht
- doppelte Gaszylinder für Sitzwinkel- und Rückenwinkelmechanismus
- mit Sitz- und Rückenverstellung
- bei SB 500 – 600 mm dynamische Bein- und Kopfstütze optional
- zuverlässige Netti Grandis Beinstütze
- Geräteträger für medizinische Geräte, optional
- Sitzbreiten: XHD 500, 550, 600 mm; XXHD 650, 700, 750 mm

INDIVI AN



NETTI 450 T – ELEKTRISCH VERSTELLBAR

- Sitzbreiten bis zu 1.000 mm
- Benutzergewicht bis zu 450 kg
- Elektrische Sitz-, Rücken- und Beinstützenfunktion
- Netti Seating System für optimale Druckverteilung



Netti 450 T
1.293



DUELLE PASSUNG



Netti 450 F
1.294



NETTI 450 F – MAXIMAL BELASTBAR

- Sitzbreiten bis zu 1.000 mm
- Benutzergewicht bis zu 450 kg
- Rückenlehne manuell in drei verschiedenen Winkeln einstellbar
- Netti Seating System für optimale Druckverteilung

VERSTÄR AUS



Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19
(max. Nutzergewicht 200 kg)

EUROCHAIR² XXL – DER EUROCHAIR-KLASSIKER IN DER XXL-VERSORGUNG

- maximale Stabilität für große und schwere Nutzer bis 200 kg
- für den aktiven, dauerhaften Alltagsgebrauch
- verstärkte Komponenten z.B. Sitz- und Rückengurt
- Vollausstattungsstuhl
- vielseitig einsetzbar und individuell anpassbar
- Faltrollstuhl mit starren Rahmenverbindungselementen und Doppelschere
- höhenverstellbare Seitenteile mit tiefeinstellbaren Armauflagen
- durchgehendes Fußbrett und querliegende Schiebestange

EUROCHAIR²
XXL
2.850



KTE FÜHRUNG



EUROCHAIR²
HD 2.850




EUROCHAIR² HD

- geeignet für schwere Personen bis 300 kg
- verstärkter Rücken- und Sitzgurt
- faltbar
- Rahmenbau aus hochfestem Stahl
- durchgehendes Fußbrett
- Armlehnen höhenverstellbar, abnehmbar
- Trommelbremse für Begleitperson
- querliegende Schiebstange

SICHER

UNTERWEGS

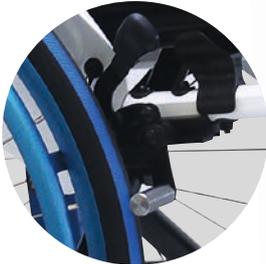

Avanti – Vielseitig und Aktiv

- feinstufige Anpassungsmöglichkeiten
- kompatibel zum MEYRA-Baukastensystem
- viel Zubehör verfügbar
- Bremse mit extrem geringer Betätigungskraft
- teleskopier- und winkleinstellbare Rückenhöhe
- höhenverstellbares Seitenteil mit Einhandbedienung
- extrem anpassungsfähig, selbst Sitzhöhen ab 37 cm sind realisierbar
- serienmäßiger Anpassrücken
- Exzentertechnologie für ein einfaches Anpassen des Fahrwerks

AVANTI
1.736





FASZIN MOBI



CL 510 – DER KRAFTVOLLE ZUVERLÄSSIGE

- kraftvoller 1600 Watt Motor
- äußerst robustes Chassis in Kassetten-Bauform
- Beleuchtungssystem mit neueste LED Technik
- Fahrwippe mit Mehrfachfunktion
- Handbremssystem optional für den Bustransport
- hochwertiges Zubehör Programm wie zum Beispiel Sitzheizung verfügbar



CL 510
1.264



ATION LITÄT

XXL



CL 515- LUXUS & KOMFORT

- Ausgewogenes Fahrverhalten
- Erstklassige Serienausstattung für außergewöhnlichen Fahrkomfort
- Rammschutz vorne und hinten
- Lautsprechersystem mit Bluetooth
- Modernste LED Beleuchtung
- USB Ladebuchse
- LCD Farbdisplay mit beleuchteter Tastatur
- Stufenlos einstellbarer Luxus Sitz
- Niederquerschnitt Luftbereifung mit Aluminium Felgen
- Sensibles Federungssystem
- Scheibenbremsen

MEYRA®

AMG ACTIVE
MOBILITY
GENERATION

UNTE IM



iCHAIR XXL – BESONDERS STABIL BIS 250 KG NUTZERGEWICHT

- verstärkte Komponenten
- zwei kraftvolle 350 Watt Motoren
- ideale Versorgung mit großer Sitzbreite bis 77 cm
- elektrische Verstellungen, wie z.B. Beinstütze und Rückenwinkelverstellung
- ErgoSeat Sitzsystem und externe Systeme zur individuellen Anpassung integrierbar
- Bedienmodul mit großem 3,5"-LCD-Farb-Display und integriertem Infrarot/Bluetooth zur einfachen Smartphone- und Umfeldsteuerung

iCHAIR
XXL
1.614



UNTERSTÜTZUNG ALLTAG

KATAPULTSITZ UPLIFT XXL

- bis 160 kg belastbar
- Textilbezug
- komfortabel gepolstert
- Liftfunktion für 4 Gewichtsklassen einstellbar
- robuste Ausführung
- praktisch für jeden Stuhl oder gerade Unterlage geeignet
- normale Sitzhöhe um 10 cm erhöht
- ohne Strom mit Gasdruckstoßdämpfer

KATAPULT-
SITZ UPLIFT



Katapultsitz Uplift

Bestellnummer	38 01 30 1
Sitzhöhe in mm	+ 100
Sitzfläche in mm	400 x 450
Belastbarkeit in kg	160
Körpergewichtsklassen in kg	90, 115, 130, 160
Gewicht in kg	3,7

SICHERHEIT IM BAD

TOILETTENSTÜTZGESTELL XXL

- robuste Konstruktion
- rutschsichere GummifüÙe
- rostfrei dank Kunststoffbeschichtung

TOILETTEN-
STÜTZ-
GESTELL
XXL



XXL DUSCHHOCKER MIT ARMLEHNEN XXL

- sehr stabile Ausführung
- komfortable Rückenlehne nachrüstbar
- rostfrei dank Kunststoffbeschichtung
- Sitzfläche und Rücken aus Aluminium
- GummifüÙe für Rutsicherheit

XXL DUSCH- HOCKER MIT ARMLEHNEN



	Toilettenstützgestell XXL	XXL Duschhocker mit Armlehnen	Rückenlehne für XXL Duschhocker
Bestellnummer	30 18 01 2	30 18 00 2	30 18 07 2
Breite in mm	600 ¹⁾ / 670 ²⁾	670 600 (zwischen den Armlehnen)	
Tiefe in mm		670	
Sitzbreite in mm	360 x 450		
Sitzhöhe in mm	550	550	
Öffnung in mm	220 x 350		
Gewicht in kg	11,8	14,8	
Höhe in mm	230 (Armlehnen)	230 (Armlehnen)	310 (ab Oberkante Sitzfläche)
Länge FixierfüÙe in mm			
Sitzfläche in mm	600 x 440	600 x 440	
Belastbarkeit in kg	200	200	

¹⁾innen
²⁾auÙen

EINFACHER TRANSFER

ALPHA RUTSCHBRETT

- sehr glatte Oberfläche
- minimiert den Reibungswiderstand
- Antirutschstreifen auf der Rückseite
- längs zweimal knickbar, um die Stabilität zu erhöhen

WEITERE
ALPHA-PRODUKTE
FINDEN SIE AUF
WWW.MEYRA.DE


ALPHA
RUTSCH
BRETT



ALPHA DREHSCHLEIBE

- zwei Scheiben mit einer Gleitebene
- rutschfeste Oberfläche
- inkl. Griff zum Transport
- auch für den Nassbereich geeignet

ALPHA DREH- SCHEIBE

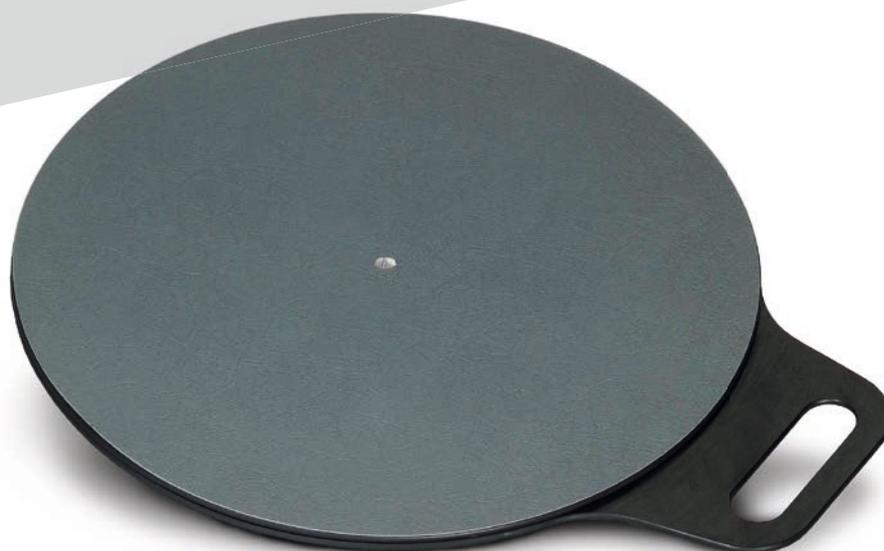

	ALPHA Rutschbrett		ALPHA Drehscheibe
Bestellnummer	38 10 00 1	38 10 00 2	38 10 02 4
HMV-Nr.	22.29.01.3000		22.29.01.0005
Maße in mm	320 x 600	320 x 750	Ø 400
Farbe	schwarz		grau
Material	Polypropylen		Polypropylen
Belastbarkeit in kg	200		200

SICHERE

UMLAGERUNG

ALPHA GLEITMATTEN

- verschiebbarer Endlosschlauch mit glatter Innenfläche
- stabil und langlebig

WEITERE
ALPHA-PRODUKTE
FINDEN SIE AUF
WWW.MEYRA.DE

ALPHA
GLEITMATTEN



ALPHA OFFENE GLEITMATTE CAREMASTER

- für liegenden und sitzenden Transfer
- extra feste Gewebefortschläufen
- zur vielseitigen Umlagerung im Bett geeignet

ALPHA OFFENE GLEITMATTE CAREMASTER



	ALPHA Gleitmatten		ALPHA Offene Gleitmatte Caremaster	
Bestellnummer	3810004	3810006	3810056	3810057
HMV-Nr.	22.29.01.2007		22.29.01.2039	
Maße in mm	500 x 600	1.000 x 700	1.750 x 600	1.850 x 700
Farbe	blau / rot		blau / rot	
Material	PES / Carbon		PES / Carbon	
Belastbarkeit in kg	200		200	

PRODUKTVORTEILE



Netti 4U CED XL 1.236

SEITE 7

- ergonomischer Schiebebügel
- anpassbare Rückenbespannung
- flexible Armlehne
- Ausziehstücke für Beinlängenausgleich
- Sitzbreitenflexibilität
- für Nutzergewichte bis 160 kg



Netti III HD 1.290

SEITE 8

- Geräteträger für medizinische Geräte verfügbar
- hochwertige Standardkonfiguration
- dynamische Optionen
- 45° Sitzkantelung verfügbar
- viele Zubehöroptionen
- für Nutzergewichte bis 160 kg



Netti III XHD 1.1295 / 1.296

SEITE 9

- verstärkte Ausführung
- doppelte Gasdruckfeder für Sitz- und Rückenverstellung
- Geräteträger für medizinische Geräte verfügbar
- für Nutzergewichte bis 200 kg



Netti 450T / 450F 1.293 / 1.294

SEITE 10 / SEITE 11

- elektrische Sitz-, Rücken- und Beinstützenfunktion (450T)
- optimale Druckverteilung mit dem Netti Seating System
- für Nutzergewichte bis 450 kg



EUROCHAIR² XXL 2.850

SEITE 12

- 5 Sitzbreiten von 480 - 650 mm verfügbar
- kompatibel mit dem MEYRA-Baukastensystem
- individuell anpassbar
- der Eurochair Klassiker mit verstärkten Komponenten
- für Nutzergewichte bis 200 kg



EUROCHAIR² HD 2.850

SEITE 13

- 3 Sitzbreiten von 700 - 800 mm verfügbar
- als verstärkter Rollstuhl besonders belastbar
- individuell einsetzbar
- erhöhte Stabilität durch querliegende Schiebestange, durchgehendes Fußbrett, Doppelkreuzstrebe
- für Nutzergewichte bis 300 kg



AVANTI 1.736

SEITE 14

- extrem anpassungsfähig auch bei sich verändernden Krankheitsbild
- hohe Variabilität ohne Teilaustausch
- kompatibel zum MEYRA-Baukastensystem
- vielfältiges, therapeutisch bewährtes Zubehör



CL 510 1.264

SEITE 16

- durchzugsstarker und laufruhiger Motor
- Reichweite bis 35 km
- 400 Watt Dauerleistung
- Gefederter Komfort-Sitz mit höhen- und winkelverstellbarer Rückenlehne, drehbar um 360°



CL 515 1.274

SEITE 17

- 700 Watt Motor
- Spitzenleistung 3.000 Watt
- 80 AH Batterien
- 8 Ampere Ladegerät
- 2 Funkschlüssel
- Geschwindigkeit bis 15 km/h
- Getränke Halter
- für Nutzergewichte bis 205 kg



iCHAIR XXL

SEITE 18

- für Nutzergewichte bis 200 / 250 kg
- Sitzbreiten bis 77 cm
- individuelle Anpassung und vereinfachter Wiedereinsatz
- elektrische Beinstützen, Rückenverstellung und Sitzkantelung
- zwei kraftvolle 350 Watt Motoren

TECHNISCHE DATEN

Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

	Netti 4U CED XL 1.236	Netti III HD 1.290	Netti III XHD 1.295 / 1.296	Netti 450T 1.293	Netti 450F 1.294
Sitzbreite in mm	550, 600	350, 380, 400, 430, 450, 500, 550, 600	XHD: 500, 550, 600 XXHD: 650, 700, 750	500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1.000	500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1.000
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	2x -15	2x -25/ 2x +12	2x -25	-	-
Sitztiefe in mm (in Schritten von 25 mm einstellbar)	425 - 500	400 - 500 (525 - 570)	400 - 500	495 - 620	440 - 540
Mögliche Rückenhöhen in mm	500 - 600	500 - 600	500 - 600	550	550
Mögliche Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm	440 - 500	460 - 490 (480 - 530)	475 - 485	430	430
Gewicht des Rollstuhls ohne Kissen in kg	29	36	36	69	50
Max. Nutzergewicht in kg	160	160	200	450	450
Max. Nutzergewicht für Autotransport in kg	136	160	-	-	-
Sitzwinkel in Grad	-5° bis +20°	-9° bis +16° (-15° bis +30°)	-9° bis +16°	-6° bis +12°	-
Rückenwinkel in Grad	92° - 137°	86° - 133°	86° - 113°	40°	80°, 94°, 104°
Zusätzliche Breite zur Sitzbreite mit Standardrädern in mm	180	220	240	200	200
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	320 - 680	360 - 640	360 - 640	320 - 680	360 - 500
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	265 - 355	170 - 310	185 - 325	185 - 325	185 - 325

	EUROCHAIR ² XXL 2.850	EUROCHAIR ² HD 2.850	AVANTI 1.736	CL 510 1.264	CL 515 1.274	iCHAIR XXL 1.614
HMV-Nr.	18.50.02.3039		18.50.03.0160			18.50.04.5004 / 18.99.06.6001
Länge in mm	max. 1.070 ⁷⁾ / max. 840 ⁸⁾	max. 1.140 ⁷⁾ / max. 900 ⁸⁾	1.120 ⁷⁾ / 850 ⁸⁾	1.200	1.650	1.150 ⁷⁾ / 850 ⁸⁾
Breite in mm				610	680	680 – 920 ⁶⁾
Breite fahrbereit in mm	680 / 700 / 730 / 780 / 850	920 / 970 / 1.020	Sitzbreite + 200mm			
Breite gefaltet in mm	310	335	280			
Sitzbreite in mm	480 / 500 / 530 / 580 / 650	700 / 750 / 800	300 – 580	variabel 450 – 670 ¹⁰⁾	460	530 – 770 ²⁾
Sitztiefe in mm	430 / 460 / 490	460 / 500	330 – 530	410	460	430 – 600 ²⁾
Unterschenkellänge in mm			290 – 520			370 – 510 ²⁾
Höhe in mm				1.260		
Sitzhöhe vorne in mm	variabel 460 – 520	475 / 500	370 – 560	variabel 420 – 480	470 – 520	460 – 560 ¹²⁾ / 530 – 630 ⁹⁾
Sitzhöhe hinten in mm	variabel 460 – 520	475 / 450	370 – 520			
Gesamthöhe in mm	930	960	830 – 920			1.020 – 1.150 ²⁾
Rückenhöhe in mm	400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	430	340 – 500	450		530 – 570 ²⁾
Armlehnenhöhe in mm	210 – 260	230 – 330	165 – 290			170 – 280 ²⁾
Transportlänge in mm			660 – 850			850
Transporthöhe min. in mm				600		650
Radgröße vorne in mm (Zoll)			100, 125, 140, 150, 175, 180 (4-7")	260		260 x 70 (10")
Radgröße hinten in mm (Zoll)	610 (24")	610 (24")	508 (20") 560 (22") 610 (24") 635 (25") 660 (26")	260	[4.00-8] Ø 315	356 x 75 (14")
Bodenfreiheit in mm				100	110	130 ¹⁾
Hindernishöhe max. in mm				60		60
Wendekreisradius in mm				1.500	1.950	950
Transportgewicht in kg	12	28	9			
Personengewicht in kg	160 / 200	300	160	165	205	200 / 250
Leergewicht in kg	19	35	14	93 ¹¹⁾	100 ¹²⁾ / 150 ¹¹⁾	130 ¹⁾
Zul. Gesamtgewicht in kg	185 / 225	335	174	260	355	340
max. Zuladung in kg						10
Fahrgeschwindigkeiten in km/h				6 / 10	15	6 / 10
Motorleistung in W				400	700	2 x 300 / 2 x 350
Motor-Spitzenleistung in W				1.600	3.000	
Reichweite max. in km				35 ³⁾	40	35 ³⁾ , 30 – 35 ⁴⁾
Batterien in Ah				2 x 12V 50 Ah	80	63 Ah (5h), 80 Ah (20h)
Ladegerät in A				6	8	12
Elektronik in A				120	PG120A	
Zulässige Steigungen / Gefälle in Prozent				9° (16 %)	10° / 18 %	15 %
Sitzkantelung elektrisch in Grad						0° bis +18° ⁵⁾
Sitzkantelung mechanisch in Grad						0° bis +10°
Rückenwinkel elektrisch in Grad						-10° bis +50°
Rückenwinkel mechanisch in Grad						-10° bis +30°
Lenkungsart						indirekt

¹⁾ ohne Armlehnen und Beinstützen

²⁾ Sitzsysteme Sitzplatte / ErgoSeat/ Sitzwinkel ist 4°

³⁾ unter Testbedingungen

⁴⁾ mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)

⁵⁾ Verstellbereich je SH und Lenkrädergröße max. +/- 3° abweichen

⁶⁾ fahrbereit

⁷⁾ mit Fußstützen

⁸⁾ ohne Fußstützen

⁹⁾ ohne Sitzpolster

¹⁰⁾ 450-700 beim CL510+

¹¹⁾ mit Batterien

¹²⁾ ohne Batterien



MEYRA GmbH Meyra-Ring 2 | D-32689 Kalletal-Kalldorf
info@meyra.de | Tel.: +49 5733 922 - 0 | Fax: +49 5733 922 - 9311 | www.meyra.de
2022-08 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler
und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.
Ident-Nr. 261 505 400

Bildnachweis: Seite 1, 3, 18-19 © „FredFroese“ – istockphoto.com; Seite 5 © „whyframeshot“,
© „contrastwerkstatt“ – stock.adobe.com; Seite 6 © „bphoto“ – stock.adobe.com